

### NOMBRE DEL PRODUCTO

Kit de prueba rápida del antígeno del virus de la panleucopenia felina.

### USO PREVISTO

Este producto no requiere ningún equipo adicional y se utiliza para la detección cualitativa in vitro del antígeno del Virus de la Panleucopenia Felina (FPV) en heces felinas.

### PRINCIPIO DE LA PRUEBA

El kit de prueba rápida del antígeno del virus de la panleucopenia felina utiliza inmunocromatografía con oro coloidal para detectar cualitativamente el virus de la panleucopenia felina (FPV) en las heces de los gatos. El anticuerpo contra la panleucopenia felina está recubierto por la membrana de nitrocelulosa. Si la muestra contiene el virus de la panleucopenia felina, el virus se unirá al anticuerpo monoclonal de la panleucopenia felina recubierto con oro coloidal en la almohadilla para formar un complejo anticuerpo-antígeno. Este complejo migra sobre la membrana por acción capilar hasta la línea de prueba (T), donde será capturado por el anticuerpo. Una línea de prueba de color (T) será visible en la ventana de resultados si el antígeno del virus de la panleucopenia felina está presente en la muestra.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE VALIDEZ

Condiciones de almacenamiento: El empaque original debe ser conservado en un lugar seco con una temperatura de entre 2 y 30°C, evitando la luz directa y nunca debe ser congelado.

Periodo de validez: 24 meses.

El reactivo debe usarse lo antes posible, dentro de 1 hora después de abierto el empaque de papel de aluminio. Se recomienda utilizarlo lo antes posible cuando la temperatura ambiente sea superior a 30°C o haya alta humedad.

### REQUERIMIENTOS DE LA MUESTRA

Colocar en un refrigerador a 2°C~8°C; Si la muestra no se puede analizar durante más de 24 horas, se debe congelar a una temperatura inferior a -20°C.


Las muestras deben alcanzar temperatura ambiente antes de realizar la prueba. Además, las muestras almacenadas congeladas deben descongelarse completamente y mezclarse bien antes de su uso. Evite congelar y descongelar repetidamente.

### INSTRUCCIONES DE USO


1. Se debe dejar que los reactivos sin abrir alcancen la temperatura ambiente antes de su uso.
2. Recoja heces frescas con un hisopo de algodón y luego retire la película de aluminio del tubo de extracción. Sumerja el hisopo en el tubo de extracción y gire el cabezal del hisopo en el diluyente durante al menos 30 segundos.
3. Al mismo tiempo, apriete el cabezal del hisopo a través de la pared exterior del tubo de extracción al menos 5 veces para garantizar que la muestra se pueda diluir completamente. Luego, apriete el cabezal del hisopo lo más fuerte posible a través de la pared exterior del tubo hasta extraer todo el

líquido. Deseche el hisopo y cubra el tubo de extracción para su uso.

4. Coloque el kit sobre una superficie horizontal. Agregue 3 gotas de la mezcla en la tableta de muestra del kit de prueba.
5. Lea los resultados en 10 minutos. No lea los resultados de la prueba después de 30 minutos ya que pueden no ser válidos.

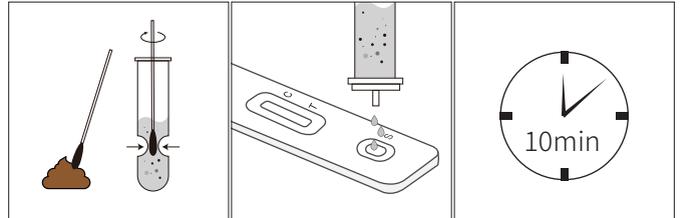

### INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

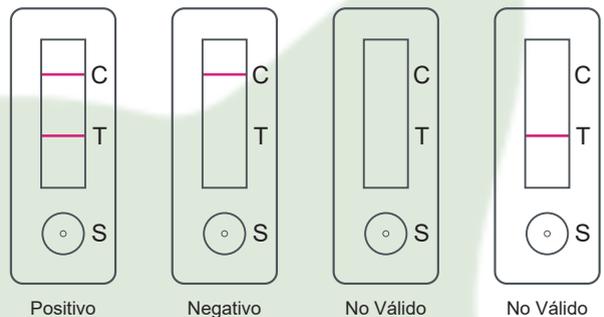

#### Resultado Positivo:

Aparecen bandas rojas tanto en la línea de prueba (T) como en la línea de control (C).

#### Resultado Negativo:

Sólo aparecerá una banda roja en la línea de control (C) en la ventana de resultados.

#### Resultado No Válido:

Si no hay una banda roja en la línea de control (C), el resultado no es válido. Se recomienda volver a realizar la prueba.

*Nota: Incluso si la línea de control (C) o la línea de prueba (T) es tenue o no uniforme, se debe considerar que la prueba se realizó correctamente y el resultado de la prueba debe interpretarse como se indica arriba.*

**Los resultados positivos deben ser interpretados por el veterinario junto con la historia clínica y otros datos disponibles.**

**PRECAUCIONES**

1. Sólo para uso animal.
2. El kit de prueba debe usarse máximo 1 hora después de abierto.
3. Realice la prueba estrictamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Los resultados pueden no ser válidos si se realiza incorrectamente.
4. No utilice si el empaque de papel aluminio ha caducado o está dañado.
5. Todos los desechos deben descontaminarse adecuadamente antes de su eliminación.

**REFERENCIAS**

1. Odend'Hal S. Feline Panleukopenia Virus[J]. Geographical Distribution of Animal Viral Diseases, 1983:199-201.

**FECHA DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUCCIONES**

2023.11.25

**FECHA DE PRODUCCIÓN Y FECHA DE EXPIRACIÓN**

Ver en el empaque.

**Producto de uso Veterinario.**

**Para su uso, consulte a su Médico Veterinario.**

**ETIQUETA INTRODUCTORIA PARA EL USUARIO**

Abreviación	Explicación	Abreviación	Explicación
	Código de Lote		Temperatura límite: 2~30°C
	Contiene suficiente para <n> tests		Fecha de fabricación
	Fabricante		Usar antes de
	Consulte instrucciones de uso		No reutilizar
	Mantener en un lugar seco		No utilizar si el empaque está deteriorado
	Mantener alejado de la luz directa		

Para más información, escanee el código:

